

# Shaker

## Funnel Shaker



(분액여두 진탕기)

### Feature



동, 식물 세포의 진탕배양, 효소반응, 혈청검사, 임상병리, 각종 효소 측매의 반응실험 등에 사용합니다.

- ▶ 상하로 왕복운동하며 진탕할 수 있게 제작
- ▶ D.C Motor를 사용하여 장시간 사용 시에도 내구성이 뛰어나며 소음도 적으며 일정한 속도를 유지
- ▶ R.P.M을 Digital Display로 표시하여 정확한 속도 확인이 가능

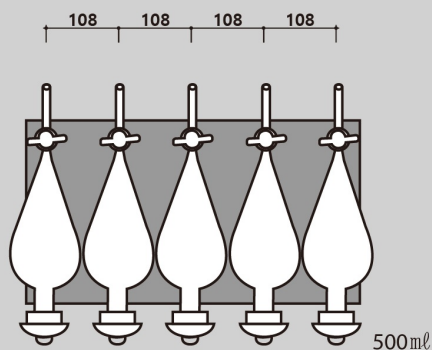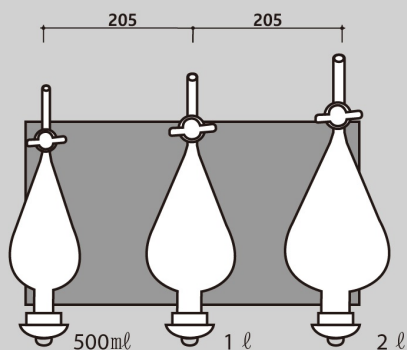

기본 사양 : Funnel Flask 기준 100ml ~ 1000ml 까지 사용 가능 (6구 기준)

- Funnel Flask 1000ml 사용 시 치수확인 필수  
(제조사별 크기가 상이함)

옵션 사양 : Funnel Flask 기준 최대 500ml 까지 사용 가능 (10구 기준)

Funnel Holder 기준 최대 2000ml 까지 제작 가능 (최대 6구 기준)

Funnel Flask	Funnel Holder	6구(3×2) (기본)	8구(4×2) (옵션)	10구(5×2) (옵션)
500ml (기본)		○	○	○
1000ml (기본)		○	○	×
2000ml (옵션)		○	×	×

## Technical Data

Model		C-SKR
Dimensions	Outer (W×D×H)(mm)	720 x 525 x 440
	No. Place	500ml 기준 10개 / 1000ml 기준 6개
Controller		Digital Display
R.P.M		50 ~ 400 R.P.M
Timer	Scale	99 Hours 59 Minutes
Electrical spec	Power	220V, 300W, 1ø
Materials	Outer	Steel plate with powder coated
Weight (Kg)		68